


この度はEXGEL® ベッド用減圧マットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、ベッド用減圧マットを正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、
使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。


仕 様

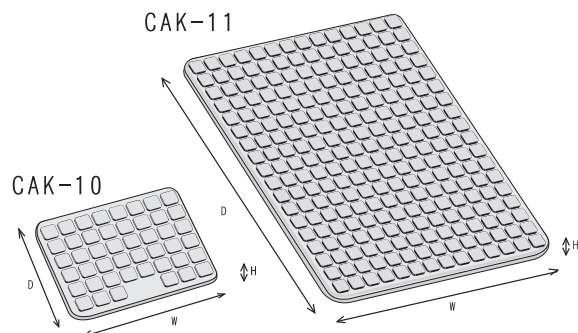

品 名	EXGEL®ベッド用減圧マット(小)		EXGEL®ベッド用減圧マット(大)	
品 番	CAK-10		CAK-11	
カラー	ブラック	パープル	ブラック	パープル
材 質	表 材		中 材	裏 材
	ウレタン合成皮革		EXGEL®(合成ゴム)・ウレタンフォーム	クロロプレンゴム または 滑り止め加工付きナイロン
寸 法	W410×D365×H21 mm		W710×D910×H25 mm	
重 量	約1.0kg		約5.3kg	

正しい使い方

- ・ベッドのマットレスの上に凹凸面を上にして平らに設置してご使用ください。

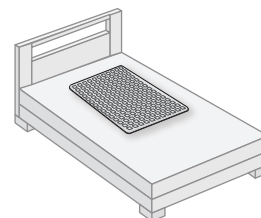

お手入れ方法

- ・本体の表地が汚れた場合は、水、又は中性洗剤を含んだ布等で拭き、陰干ししてください。（漂白剤等のご使用不可）
- ・煮沸消毒をしたり、50℃以上の熱湯をかけたりしないでください。
- ・消毒する場合は、汚れをきれいに取り除き、アルコールスプレー等を噴霧してください。
- ・本体は洗濯機、乾燥機のご使用はできません。

安全上の注意事項

- ・疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。
- ・ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。
その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
- ・製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- ・水周り（お風呂等）で使用しないでください。
- ・本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- ・摂氏80度以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- ・分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。
- ・長期間クッションの上に重量物を置かないでください。
クッション表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。
- ・製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- ・切断したり穴を開けて使用しないでください。
- ・誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- ・廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。
- ・保管する際は、製品を立て掛けずに平らに置いてください。
- ・直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- ・暖房機器等で直接温めて使用しないでください。
- ・ご使用になる場所やご使用方法、洗濯の方法等により、カバー底面の滑り止め樹脂が削れる場合がありますのでご注意ください。