

EXGEL
SEATING LAB

株式会社 加地

《本 社》〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成1295-3

《横浜営業所》〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-11 加瀬ビル88 8F

《京都営業所》〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3-2-7

TEL:0854-54-2288 FAX:0854-54-2282

TEL:045-482-3551 FAX:045-482-3552

TEL:0774-98-2633 FAX:0774-95-3853



www.exgel.jp/jpn/

- エクスジェル®は株式会社加地の登録商標です。
- 掲載商品の仕様・デザイン・スペック等は予告なく変更する場合があります。
- 印刷の都合上、実物と多少色、仕様が異なる場合があります。
- サイズなどは多少個体差があります。あらかじめご了承ください。

© 2024 KAJI CORPORATION.

信頼の日本製

本誌に掲載されているエクスジェルクッションは全て日本製です。

2024.05

www.exgel.jp/jpn/

EXGEL
SEATING LAB



HEALTHCARE SEATING

Products Lineup



心地のよい
シーティングで、
人生はもっと
楽しく輝きます。



「座る」という行為は、
暮らしの中で多くの時間をしめるもの。

車いすで生活される方にとっては
快適に座ることは、心地よく毎日を過ごすことと同じです。
でももし、座る時間が苦痛になれば
それは、どんなに辛いことでしょう。

座り心地はひとそれぞれ。確かな正解はありませんが
自分のカラダに合った最適なクッション選びも
解決法のひとつなのかもしれません。

座ることを、もっと楽しく、ずっと快適にしたい。
「座る」を変えるエクスジェルは、
車いすでの暮らしを、ラクに、豊かにしてくれます。
心地よいシーティングから
人生をもっと輝かせてください。

「座る」を変える、体圧“流動”分散。

EXGEL®

私たちが理想とするシーティングとは、


座ったときにお尻にかかる圧力を分散し、常に身体全体がリラックスした状態に導くこと。

そして、あらゆるシーンで快適に過ごせる姿勢を長く保つには、

座っている間に無意識に繰り返される身体のズレに添う流動性が不可欠です。

それらを可能にしたのが、体圧“流動”分散という特性を持つ『エクスジェル』。高反発でも低反発でもない

奇跡的なマテリアルが、座るときに起こる「衝撃」「圧力」「ズレ」という問題をすべて解決します。

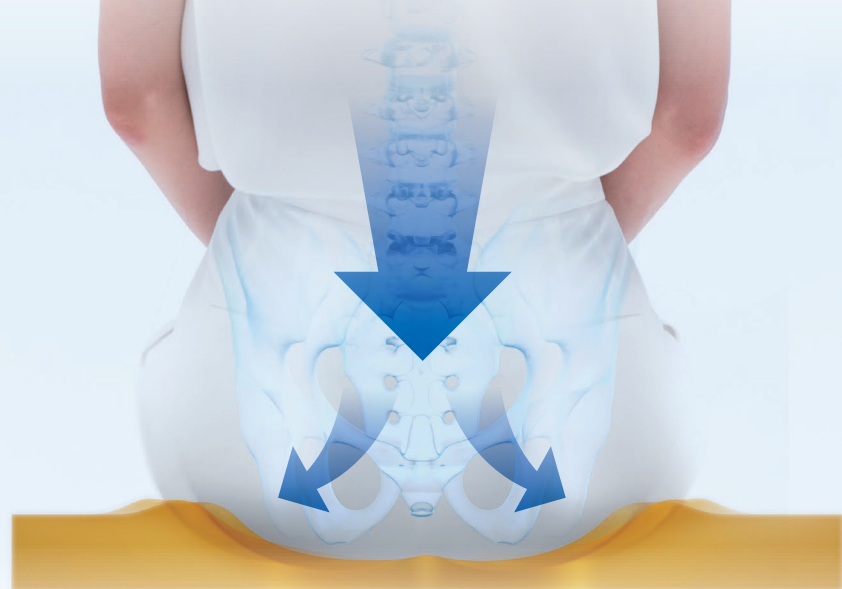


「エクスジェル」の3つの特性が、「座る」の3つの問題を解決。



衝撃を吸収する

弾力性

車いすへ移乗する際、利用者の身体には想像以上に大きな衝撃がかかります。エクスジェルは、座る瞬間の衝撃をおもちのような優しい弾力で受け止め、底つき感ありません。

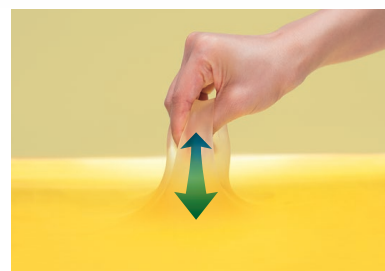

圧力を分散する

柔軟性

固体であるにもかかわらず、約20倍まで伸び、元の形に復元するという驚異の柔軟性でお尻に集中する圧力を包み込むように分散します。



ズレに寄り添う


流動性

車いすに長時間座り続けていると、お尻は自然と前にすべるため、ズレる力が発生します。エクスジェルはそんな動きにもびったりと寄り添い、お尻への負担を軽減します。

実証、縦の実力。

座り続けるとき、終始お尻にかかり続ける縦の圧力。エクスジェルは、自社衝撃吸収力テストで、一般的なウレタンフォームの10倍以上の衝撃吸収力を発揮。座った瞬間の衝撃も、座り続ける圧力も、やさしく受け止め分散します。


ゴルフボールを1mの高さから落下。ウレタンフォームがその半分ほどの高さまで跳ね返る一方、エクスジェルは、ほぼ跳ね返りなく衝撃を吸収。

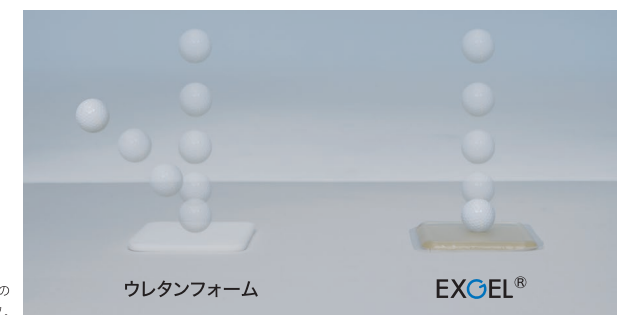

実証、横の実力。


座っているとき、無意識に繰り返される体のズレ。エクスジェルは、そんな横のズレに対する実験でも、動きに合わせてジェルが自在に動くことで、お尻への負担を軽減できることが実証されました。

エクスジェルとウレタンフォーム、それぞれに桃を押し付けて横にずらすと、ウレタンフォームは摩擦により皮に傷がつくのに対し、エクスジェルは無傷。

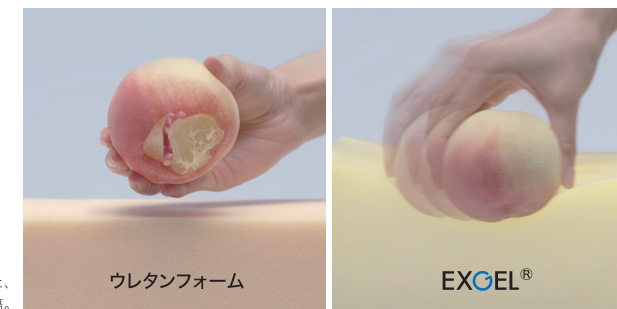


実証、分散の実力。

座っている際に圧力が一点に集中すると、疲れや痛みの原因につながります。エクスジェルは固体であるにもかかわらず、優れた柔軟性で圧力を分散して負担を軽減します。

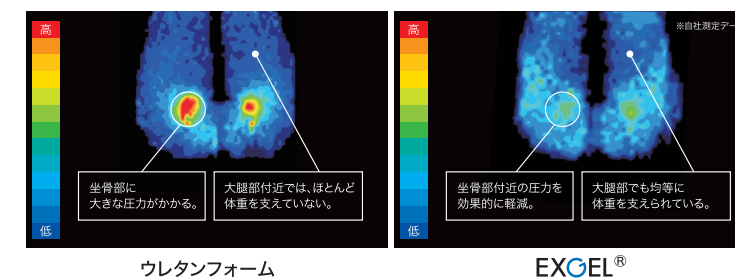

エクスジェルとウレタンフォームの最適なコンビネーション

ジェルの流動性とウレタンフォームの軽さを組み合わせたコンビネーション(積層構造)クッションです。エクスジェルの特性を最大限に生かしながら、上質なウレタンフォームを組み合わせて軽さも実現。車いす用クッションの最上位モデルを追求しました。

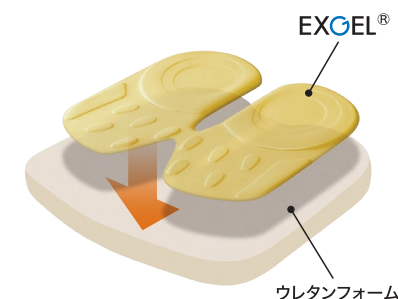

グローバルな規格にも適合する信頼の日本製

エクスジェルは国際的に統一された安全性基準であるエコテックススタンダード100の認証を受けています。エクスジェルを用いた製品は株式会社加地がISO9001の品質マネジメントの下で製造しています。



リハビリテーションの専門家との共同開発により完成しました。

アウルケアは、企業や大学と共同で障がい者の暮らしを支援する機器開発に取り組まれている横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発によって完成いたしました。車いす用クッションに、圧力分散性に優れ身体の動きに馴染む素材エクスジェルと、姿勢保持等を考慮した様々な形状を組み合わせ、利用者の状況に応じて選択できるよう、数種類のクッションをラインナップしています。


あなたに合ったクッションを見つけましょう。

車いすを利用される方にとって、車いす上で座位姿勢を自力で保てるかどうかで、サポートの必要な部位とクッションの種類が異なります。

まず座位姿勢をとり姿勢が崩れたり不安定にならないか判断し、ご自身の状態にあったクッションを選びましょう。


車いす上での姿勢は…

座位を保つことができる

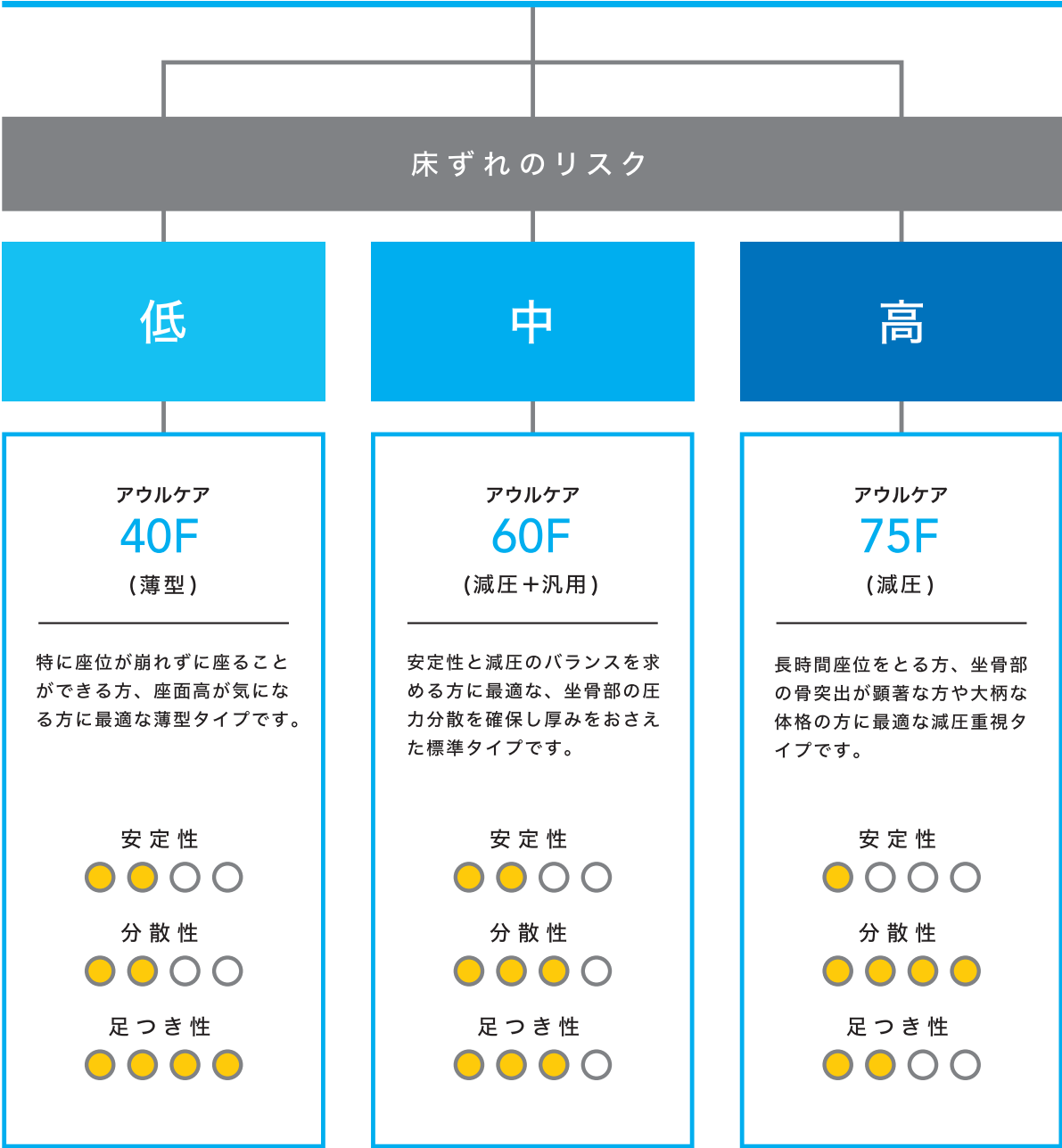

座位が崩れやすい

自分で座位が変えられない

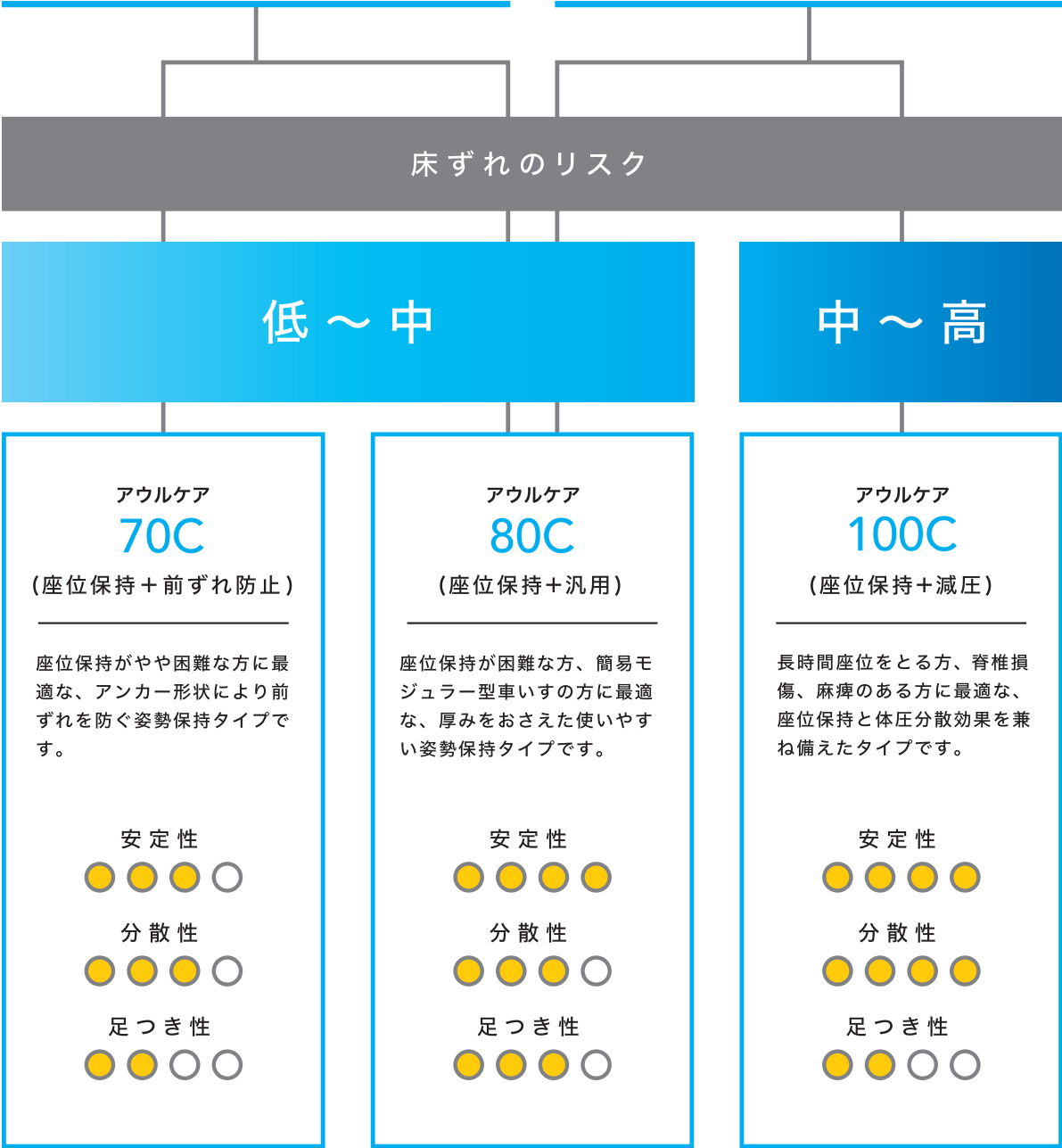

※上記の選び方はあくまでも参考です。身体の状態、車いす、目的にもよりますので、福祉用具専門相談員などにご相談のうえ選定ください。※安定性、分散性、足つき性はアウルケア6商品と比較した場合の参考イメージになります。

ご自分で座位を保つことができる方に。

車いすを利用される方が自力で座位保持できる場合は
身体にかかる圧力を分散して使いやすいフラットタイプがおすすめです。
体圧分散性や目的に合わせ3つの厚みからご利用いただけます。


厚さ4cmの薄さで足つき性の良い
薄型タイプ

- 対象者
- ◎自力での座位保持が可能な方
 - ◎足こぎされる方
 - ◎低床の車いすをお使いの方



OWLCARE | アウルケア 40F

□アウルパターン(アウルケア共通)

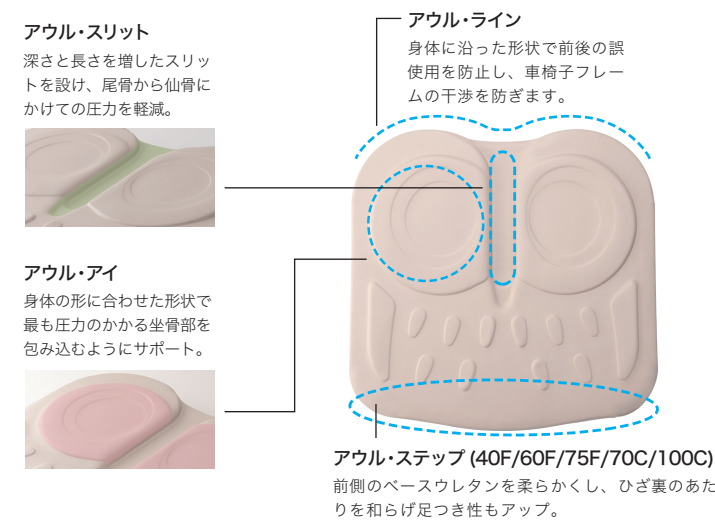

- 厚み
4cm
- フラット
形状
- アウル
パターン
- 体圧
分散

適度な厚みで体圧分散性を
持つ標準タイプ

- 対象者
- ◎自力での座位保持が可能な方
 - ◎薄いクッションは不安な方
 - ◎厚いクッションは使いにくい方



OWLCARE | アウルケア 60F


□エクスジェルを全面配置
(アウルケア共通)

エクスジェルを坐骨部だけでなく大腿部まで全面に配置。本体表皮はエクスジェルの感触を発揮する、しなやかなストレッチ性の合皮を採用。アルコール消毒なども可能です。



□高品質ウレタンのベストな組み合わせ

ベースのウレタンフォームを最適に組み合わせることで、坐骨部の程良い沈み込み量と安定性のバランスを実現。

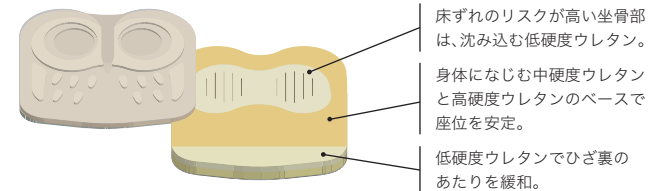

- 厚み
6cm
- フラット
形状
- アウル
パターン
- 体圧
分散

坐骨部の深い沈み込み量を
確保した減圧重視タイプ

- 対象者
- ◎自力での座位保持が可能な方
 - ◎坐骨部の骨突出が顕著な方
 - ◎沈み込みでの減圧効果が必要な方



OWLCARE | アウルケア 75F

□より深い沈み込み量で、高い減圧効果を実現

40Fよりも沈み込みがある75Fは、エアクッションに近い減圧効果を発揮。骨突出があるなど床ずれリスクが高い方に適しています。



□調整いらずのシンプル設計

難しい調整は一切必要ありません。車いすに置くだけで簡単にご利用いただけます。



- 厚み
7.5cm
- フラット
形状
- アウル
パターン
- 体圧
分散

専用カバーについて

ご利用の際には、機能性に優れた付属の専用カバーをつけてご利用ください。付属しているストレッチ性カバーはムレを軽減し、裏面には断熱層と防水機能のあるフィルムをラミネート加工しています。

製品仕様表

品名		品番	JANコード	TAISコード	介護保険・介助者対応	標準カバー	ポリエステル	サイズ (mm)			重量 (約 kg)	カラー	希望小売価格	
								W	D	H			本体 + カバー	替えカバー
アウルケア 40F	360幅	OWL40F-BK1-3640	4544511019657	00540-000067	○	○		360	400	40	1.0	本体：ベージュ カバー：ブラック	¥26,950 (税込)	¥6,600 (税込)
	380幅	OWL40F-BK1-3840	4544511019718	00540-000067				380			1.1			
	400幅	OWL40F-BK1-4040	4544511019596	00540-000067				400			1.1			
	420幅	OWL40FW-BK1-4240	4544511019770	00540-000073				420			1.2		¥29,700 (税込)	¥7,150 (税込)
	440幅	OWL40FW-BK1-4440	4544511019831	00540-000073				440			1.2			
アウルケア 60F	360幅	OWL60F-BK1-3640	4544511019664	00540-000068	○	○		360	400	60	1.1	本体：ベージュ カバー：ブラック	¥29,150 (税込)	¥6,600 (税込)
	380幅	OWL60F-BK1-3840	4544511019725	00540-000068				380			1.2			
	400幅	OWL60F-BK1-4040	4544511019602	00540-000068				400			1.2		¥31,900 (税込)	¥7,150 (税込)
	420幅	OWL60FW-BK1-4240	4544511019787	00540-000074				420			1.3			
	440幅	OWL60FW-BK1-4440	4544511019848	00540-000074				440			1.3			
アウルケア 75F	360幅	OWL75F-BK1-3640	4544511019671	00540-000069	○	○		360	400	75	1.3	本体：ベージュ カバー：ブラック	¥31,350 (税込)	¥6,600 (税込)
	380幅	OWL75F-BK1-3840	4544511019732	00540-000069				380			1.3			
	400幅	OWL75F-BK1-4040	4544511019619	00540-000069				400			1.4		¥34,100 (税込)	¥7,150 (税込)
	420幅	OWL75FW-BK1-4240	4544511019794	00540-000075				420			1.4			
	440幅	OWL75FW-BK1-4440	4544511019855	00540-000075				440			1.5			

座位が崩れやすい方や、ご自分で変えられない方に。

車いすを利用される方の座位保持が難しい場合は

姿勢保持機能がついたコンタータイプがおすすめです。骨盤を安定させ、

前ずれしにくい設計なので安心して座り続けることができます。

アンカー形状により前ずれを防ぐ姿勢保持タイプ

対象者


- ◎自力での座位保持がやや困難な方
- ◎前ずれしてしまう方
- ◎移乗の負担を和らげたい方



□前ずれを防ぐアンカー形状


クッション前端部は厚みを増し、骨盤の後傾による前ずれを防ぎます。

骨盤が傾き、前方にずれる。

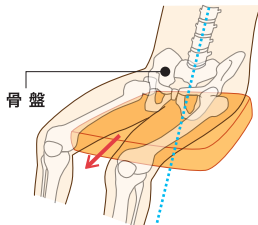

◎一般的なクッション

アンカー形状が骨盤の後傾による前ずれを防ぎます。

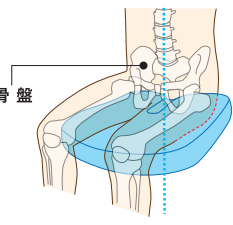

◎アウルケア70C

OWL CARE | アウルケア 70C

- 最厚部 7.0cm
- 坐骨部 4.6cm
- アンカー形状
- アウルパターン
- 体圧分散
- 姿勢保持
- 前ずれ防止

3D形状で最大限の薄さを実現した汎用性の高い姿勢保持タイプ


対象者

- ◎自力での座位保持が困難な方
- ◎骨盤や大腿部の支持が必要な方
- ◎座位が安定せず長時間座れない方



□3D形状でしっかりと姿勢保持

3D形状で姿勢を保持しつつ、厚みをおさえた汎用性の高いクッションです。

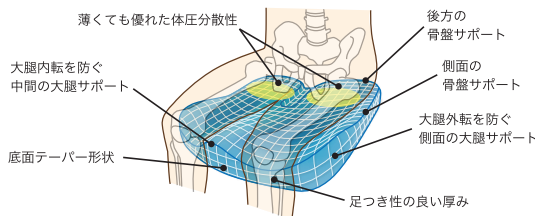

□足つき性に配慮

アウルケア 80Cの大腿部の高さは約50mmで、足つき性に配慮しています。



OWL CARE | アウルケア 80C

- 最厚部 8.0cm
- 坐骨部 3.5cm
- 3D形状
- アウルパターン
- 体圧分散
- 姿勢保持
- 内転防止
- 外転防止


起伏の強い3D形状で沈み込みのあるハイスpekクな姿勢保持タイプ

対象者

- ◎自力での座位保持が困難な方
- ◎坐骨部の減圧が必要な方
- ◎下肢に麻痺や緊張などがある方




□3D形状でしっかりと姿勢保持

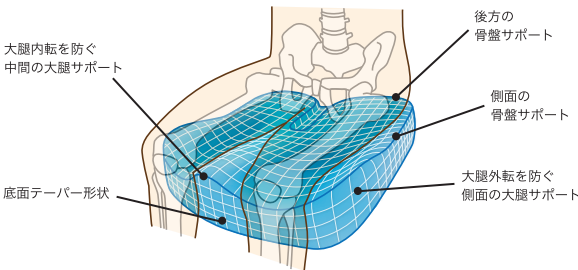

□沈み込むソフトな着座感

3D形状で姿勢を保持しつつ、坐骨部は沈み込みでの減圧効果を発揮します。

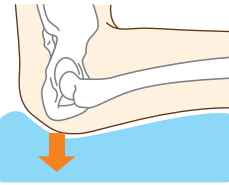

OWL CARE | アウルケア 100C

- 最厚部 10cm
- 坐骨部 5.5cm
- 3D形状
- アウルパターン
- 体圧分散
- 姿勢保持
- 内転防止
- 外転防止

専用カバーについて

ご利用の際には、機能性に優れた付属の専用カバーをつけてご利用ください。付属しているストレッチ性カバーはムレを軽減し、裏面には断熱層と防水機能のあるフィルムをラミネート加工しています。

製品仕様表

品名		品番	JANコード	TAISコード	介護保険・標準カバー対応	ポリエーテルバスター	サイズ (mm)			重量 (約 kg)	カラー	希望小売価格	
							W	D	H			本体 + カバー	替えカバー
アウルケア 70C	360幅	OWL70C-BK1-3640	4544511019688	00540-000070	○	○	360	400	(A) 70 (B) 65 (C) 46	1.2	本体：ベージュ カバー：ブラック	¥30,800 (税込)	¥7,150 (税込)
	380幅	OWL70C-BK1-3840	4544511019749	00540-000070			380			1.2			
	400幅	OWL70C-BK1-4040	4544511019626	00540-000070			400			1.3			
	420幅	OWL70CW-BK1-4240	4544511019800	00540-000076			420			1.3		¥34,100 (税込)	¥7,700 (税込)
	440幅	OWL70CW-BK1-4440	4544511019862	00540-000076			440			1.4			
アウルケア 80C	360幅	OWL80C-BK1-3640	4544511019695	00540-000071	○	○	360	400	(A) 80 (B) 50 (C) 35	1.4	本体：ベージュ カバー：ブラック	¥33,000 (税込)	¥7,150 (税込)
	380幅	OWL80C-BK1-3840	4544511019756	00540-000071			380			1.5			
	400幅	OWL80C-BK1-4040	4544511019633	00540-000071			400			1.6		¥36,300 (税込)	¥7,700 (税込)
	420幅	OWL80CW-BK1-4240	4544511019817	00540-000077			420			1.6			
	440幅	OWL80CW-BK1-4440	4544511019879	00540-000077			440			1.7			
アウルケア 100C	360幅	OWL100C-BK1-3640	4544511019701	00540-000072	○	○	360	400	(A) 100 (B) 70 (C) 55	1.5	本体：ベージュ カバー：ブラック	¥36,300 (税込)	¥7,150 (税込)
	380幅	OWL100C-BK1-3840	4544511019763	00540-000072			380			1.6			
	400幅	OWL100C-BK1-4040	4544511019640	00540-000072			400			1.6		¥38,500 (税込)	¥7,700 (税込)
	420幅	OWL100CW-BK1-4240	4544511019824	00540-000078			420			1.7			
	440幅	OWL100CW-BK1-4440	4544511019886	00540-000078			440			1.8			

アウルサポート

車いす上で長い時間座るには、快適な姿勢を保持し続けられることが大切です。
アウルサポートはあらゆる体格や座位に対応し、骨盤や体幹をサポートすることができる
姿勢保持クッション。やさしく包み込むようにサポートし、車いすでの毎日を快適にします。

体圧分散 姿勢保持

- 対象者
- ◎自力での座位保持が困難な方
 - ◎上半身に左右の傾きがある方
 - ◎骨盤後傾により前ずれしてしまう方



アウルサポートシートクッション

エクスジェルが体圧を分散して快適な座り心地。



アウルサポートバッククッション

きめ細かい位置調整で様々な座位・体格に対応。



品名				バッククッション 替えパーツ		別売りパーツ
						
		アウルサポート バッククッション	アウルサポート シートクッション	替え・背パッド(2個セット)	替え・腰パッド(2個セット)	腰後部パッド
品番	セット	OWLS-S01B01		OP-PD-BA-OWLS-B01	OP-PD-WT-OWLS-B01	OP-PD-WB-OWLS-B01
	単品	OWLS-B01	OWLS-S01			
JANコード	セット	4544511013174		4544511013198	4544511013181	4544511013273
	単品	4544511013143	4544511013136			
TAISコード	セット	00540-000017		—	—	—
	単品	00540-000015	00540-000016			
介護保険・レンタル対応		○	○	—	—	—
ポリエステル標準カバー		○	○	—	—	—
寸法(mm)	W	480	400	125	140	340
	D	120	400	180	135	50
	H	365	前 70	110	90	130
			中 55			
後 50						
製品重量(約・kg)		1.4	1.2	—	—	—
希望小売価格	本体+カバー	¥22,000(税込)	¥22,000(税込)	¥4,400(税込)	¥2,750(税込)	¥3,850(税込)
	替えカバー	¥4,400(税込)	¥4,950(税込)			


専用カバーについて

ご利用の際には、機能性に優れた付属の専用カバーをつけてご利用ください。付属しているストレッチ性カバーはムレを軽減し、裏面には断熱層と防水機能のあるフィルムをラミネート加工しています。

バッククッション ロータイプ/ハイトイプ

車いすで腰や背中をサポートが必要な方のために、調整がいらずに置くだけで簡単に使えるバッククッション。お尻の後ろの隙間を埋め、骨盤後傾を防ぎ、前ずれを抑制。上半身の荷重を受けとめることでお尻への負担を軽減します。

体圧分散 姿勢保持

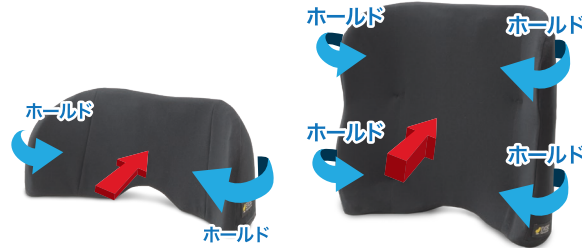

- 骨盤を左右からホールドすることで体幹が安定。※ロータイプ
- 骨盤と体側を左右からホールドすることで体幹の傾きやねじれを抑制。※ハイトイプ
- 本体中央下部のアーチ形状で通気性に配慮。
- 調整の必要がなく、車いすに置くだけで使用可能。



製品仕様表		バッククッション ロータイプ	バッククッション ハイトイプ
品名		BAC01-BK	BAC02-BK
品番		4544511013679	4544511013686
JANコード		00540-000034	00540-000035
介護保険・レンタル対応		○	○
ポリエステル標準カバー		○	○
寸法 (mm)	W	400	400
	D	140	170
	H	180	380
製品重量 (約・kg)		0.5	1.1
希望小売価格	本体+カバー	¥13,200 (税込)	¥22,000 (税込)
	替えカバー	¥4,400 (税込)	¥6,600 (税込)

専用カバーについて

ご利用の際には、機能性に優れた付属の専用カバーをつけてご利用ください。

モニートリハ

円背で前ずれしやすい方のために設計した背座一体型クッションです。背中のV字カットが背骨の圧力を軽減し、骨盤サポート形状が安定した座り心地を実現します。

体圧分散 姿勢保持 内転防止 外転防止

- 対象者
- ◎円背で前ずれ傾向がある方
 - ◎背骨、尾骨部に骨突出がある方



- V字カット/尾骨ポケット
V字カットと尾骨ポケットが背骨と尾骨の圧力を軽減。
- 骨盤サポート
骨盤を左右からしっかり支え、体幹を安定させます。
- アンカー形状
座面前部のアンカー形状が前ずれを抑制。

製品仕様表		モニートリハ
品名		MOR01-BK1
品番		4544511013785
JANコード		00540-000056
介護保険・レンタル対応		○
ポリエステル標準カバー		○
寸法 (mm)		W400×D420×H210 (座面奥400)
製品重量 (約・kg)		1.2
希望小売価格	本体+カバー	¥35,200 (税込)
	替えカバー	¥7,150 (税込)

専用カバーについて

ご利用の際には、機能性に優れた付属の専用カバーをつけてご利用ください。付属しているストレッチ性カバーはムレを軽減し、裏面には断熱層と防水機能のあるフィルムをラミネート加工しています。


子ども用車いすクッション

- 3D
形状
- アウル
パターン
- 体圧
分散
- 姿勢
保持
- 内転
防止
- 外転
防止

アウルキッズ

車いすをご利用のお子様のために誕生したキッズサイズのアウルクッション。
アウルキッズは優れた体圧分散性はもちろん、内転・外転を防止するなど、
お子様に必要な機能をデザインした新しいお友達です。


対象者 ◎姿勢保持を必要とする方 ◎前ずれしてしまう方

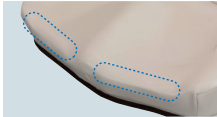

フロントスラント構造
前端部を傾斜させて、足つき性に配慮しました。



アウル・アンカー
安定した着座姿勢をサポート。前ずれも防ぎます。

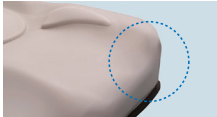


アンダーカット
底面のエッジが脚に当たらないよう前端下部をカット。

アウルキッズ アジャスタブル

骨盤や大腿部の安定性かんたんに調整できるように
設計された小児用車いすクッションです。

対象者

- ◎骨盤や大腿部の安定性が必要な方
◎自力で座位保持が困難な方
◎座位姿勢に左右差のある方
◎前ずれしてしまう方

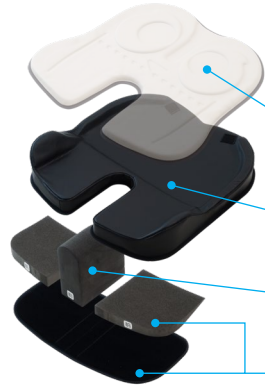


ジェルシートは取り外しが可能。車椅子以外のさまざまな着座シーンでも活用することが可能です。

前ずれを抑制するアンカーや、外転防止にも配慮した立体形状のベースで、安定した着座の実現を目指す。

内転防止用のボメルはカットや接着が容易な発泡PEを採用し、後加工で高さ調整が可能です。

大腿部は高さ調整用のクサビ形パッドを面ファスナーで簡単に着脱可能。左右で高さを変えることが可能です。

製品仕様表

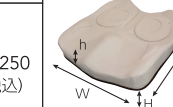品名		品番	JANコード	寸法 (mm)				製品重量 (約・kg)	希望小売価格			
				W	D	H	h		本体 + カバー	替え カバー		
アウルキッズ		260幅	OWK01-BK1-2628	4544511013396	260	280	70	55	0.7	¥30,800 (税込)	¥8,250 (税込)	
		280幅	OWK01-BK1-2830	4544511013402	280	300			0.8			
		300幅	OWK01-BK1-3032	4544511013389	300	320			0.9			
		300幅	OWK01-BK1-3034	4544511019008	300	340			0.9			
		320幅	OWK01-BK1-3234	4544511013419	320	340			1.0			
アウルキッズ アジャスタブル (カラー／色番) ● ブラック／BK1 ● レッド／RD1 ● ブルー／BL1 ● グリーン／GN1 ● ピンク／PK1		260幅	OWK02-色番-2628	BK1:4544511014577 RD1:4544511014669 BL1:4544511014676	260	280	-	120	0.8	¥40,700 (税込)	¥7,150 (税込)	
		280幅	OWK02-色番-2830	BK1:4544511014560 RD1:4544511014621 BL1:4544511014638	280	300			0.9			
		300幅	OWK02-色番-3032	BK1:4544511014553 RD1:4544511014584 BL1:4544511014591	300	320			1.0			
		320幅	OWK02-色番-3234	BK1:4544511014546 RD1:4544511014706 BL1:4544511014713	320	340			1.1			

アウルキッズ アジャスタブル 替えパーツ

	品番	寸法 (mm)			希望小売価格		品番	寸法 (mm)			希望小売価格		品番	寸法 (mm)			希望小売価格
		W	D	H				W	D	H				W	D	H	
	OWK02-色番-2628-C	-	-	-	¥7,150 (税込)		OWK02-2628-GS	320	295	17	¥12,100 (税込)		OWK02-2628-B	260	280	65	¥14,850 (税込)
	OWK02-色番-2830-C						OWK02-2830-GS	340	315				OWK02-2830-B	280	300		
	OWK02-色番-3032-C						OWK02-3032-GS	360	335				OWK02-3032-B	300	320		
	OWK02-色番-3234-C						OWK02-3234-GS	380	355				OWK02-3234-B	320	340		
	OWK02-2628-WG	103	120	3~20	¥4,400 (税込)		OWK02-PM	47	110	110	¥4,400 (税込)		OWK02-2628-BP	266	146	5	¥3,850 (税込)
	OWK02-2830-WG	113	120										OWK02-2830-BP	286	146		
	OWK02-3032-WG	123	120										OWK02-3032-BP	306	146		
	OWK02-3234-WG	133	120										OWK02-3234-BP	326	146		

【カラー／色番】ブラック／BK1、レッド／RD1、ブルー／BL1、グリーン／GN1、ピンク／PK1

専用カバーについて

ご利用の際には、機能性に優れた付属の専用カバーをつけてご利用ください。付属しているストレッチ性カバーはムレを軽減し、裏面には断熱層と防水機能のあるフィルムをラミネート加工しています。アウルキッズアジャスタブルの脚側のマチ生地には防水性はありませんが、ストレッチ性が高く吸水・速乾性と消臭機能があります。


さまざまな生活シーンでの
ケア製品

車いすでの生活、入浴、睡眠など、さまざまな生活シーンにおいても
エクスジェルのケア製品がお手伝い。暮らしに安心と快適をお届けします。

アームレストパッド

車いす・ポータブルトイレ・いすなどのひじかけに最適。
エクスジェルがひじをソフトにサポート。
洗濯可能なカバー付き。

【エクスジェル配置図】

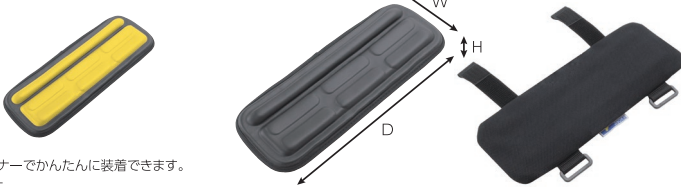

品名 アームレストパッド

- ・取り付けは面ファスナーでかんたんに装着できます。
- ・製品は左右兼用です。

品番	カラー	サイズ	JANコード	TAISコード	本体の寸法	対応するひじかけの幅(約)	製品重量(約)	希望小売価格	替えカバー小売価格
AMR01-BK	ブラック	M	4544511013464	00540-000032	W98×D260×H11mm	40～55mm	0.11kg	¥6,270(税込)	¥2,200(税込)
AMR02-BK		L	4544511013471	00540-000033	W113×D260×H11mm	55～70mm	0.14kg		

エクスジェル 浴室クッション

エクスジェルのやさしい座り心地と安心の防水仕様。
いすに固定できるベルト付き。

【エクスジェル配置図】



品名 エクスジェル 浴室クッション

品番	カラー	JANコード	TAISコード	寸法	製品重量(約)	希望小売価格
BRC01-BR	ブラウン	4544511060284	00540-000054	W350×D240×H15mm	0.5kg	¥14,300(税込)

装着クッション

エクスジェルのやさしい座り心地と安心の防水仕様。ベルトで腹部と大腿部を固定し、
長さ調整が可能。バックル仕様で着脱簡単。浴槽内でも使用できます。

【エクスジェル配置図】



品名 装着クッション

品番	カラー	JANコード	サイズ	製品重量(約)	希望小売価格
BRC03-BR	ブラウン	4544511060291	W315×D300×H235(mm) ベルト除く	1.1kg	¥26,400(税込)

シャワーいす用クッション

滑りにくく安定した座り心地で、シャワーいすをより快適に。

【エクスジェル配置図】




品名 シャワーいす用クッション

品番	カラー	JANコード	TAISコード	寸法	製品重量(約)	希望小売価格
AFK-01	ブルー	4544511060055	00540-000001	W345×D240×H20mm	0.5kg	¥8,250(税込)

浴室床マット

水に強く足裏感覚が気持ちいい。バスタイムを安全で快適にするマット。

【エクスジェル配置図】

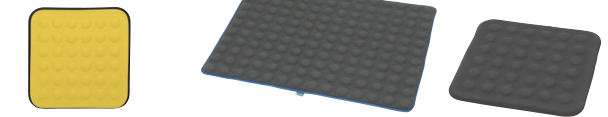

品名 浴室床マット

商品種別	品番	カラー	JANコード	TAISコード	寸法	製品重量(約)	希望小売価格
大	AFK-20	ブラック	4544511060246	—	W570×D710×H20mm	3.1kg	¥40,700(税込)
	AFK-21		4544511060253	—	W380×D380×H20mm	1.0kg	¥14,300(税込)

ベッド用減圧マット

ベッドにいる時間の長い方に最適な、体圧分散効果のあるマット。

【エクスジェル配置図】



品名 ベッド用減圧マット

商品種別	品番	カラー	JANコード	TAISコード	寸法	製品重量(約)	希望小売価格
大	CAK-11-BK	ブラック	4544511012597	00540-000022	W710×D910×H25mm	5.3kg	¥58,300(税込)
	CAK-11-P	パープル	4544511012603	00540-000022	W710×D910×H25mm	5.3kg	¥58,300(税込)
小	CAK-10-BK	ブラック	4544511012634	—	W410×D345×H21mm	1.0kg	¥18,150(税込)
	CAK-10-P	パープル	4544511012641	—	W410×D345×H21mm	1.0kg	¥18,150(税込)